
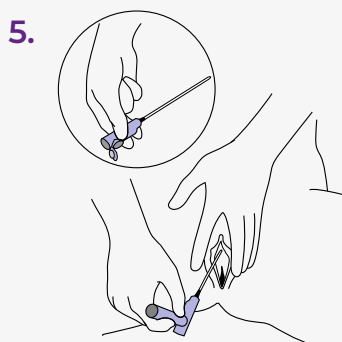
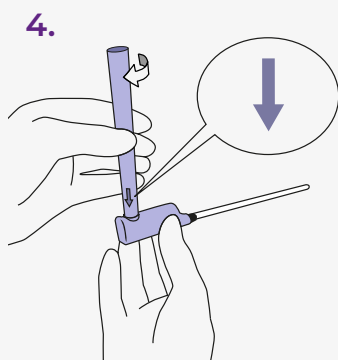
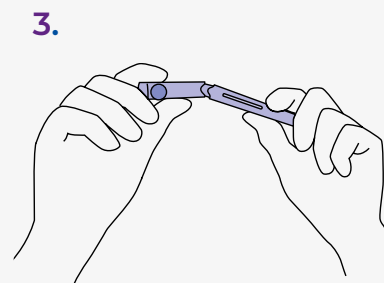


Quick Guide LoFric Elle-katetrar

Skanna för
detaljerade
instruktioner

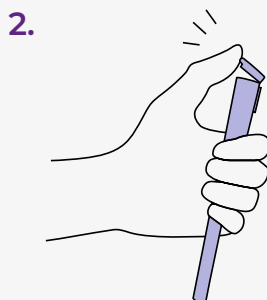

1. Tvätta händerna ordentligt med tvål och vatten.
2. Öppna det övre sterila barriärlocket.
3. Greppa katetern och böj försiktigt den övre delen för att öppna. Drag ut katetern. Töm ut den resterande vätskan från behållaren (i toaletten eller handfatet).
4. ALTERNATIV: Katetern kan användas med eller utan handtaget. Handtaget ger ökad räckvidd och mer hygienisk kateterisering. Fäst handtaget på katetern med ett klick, kontrollera att pilen på handtaget pekar mot katetern.
5. Luta ditt bäcken framåt, sära på blygdläpparna, dra dem försiktigt

uppåt, urinröret ligger strax ovanför vaginalöppningen. Med andra handen, för katetern långsamt in i urinrörsöppningen, tills urin börjar rinna, för in den lite längre för att säkerställa att båda kateterögonen befinner sig i urinblåsan.

När urinflödet avtar till droppar, dra ut katetern långsamt. Om urin börjar rinna igen, vänta tills urinflödet upphör, för att säkerställa fullständig tömning av urinblåsan.

6. Sätt tillbaka katetern i den nedre behållaren. Kassera eller förvara den i din väska tills du kan slänga den. Vänligen notera! Behållaren är återvinningsbar som plastförpackning.

LoFric® Elle™

Viktig information

LoFric[®] Elle[™] hydrofil engångskateter, klar att använda.

För kvinnliga användare: Vuxna, ungdomar och barn.

För blåsskötsel med ren intermittent kateterisering vid kort- eller långtidsanvändning.

LoFric skall endast användas efter förskrivning.

Innan användning säkerställ att de råd och instruktioner kring kateteriseringsproceduren som du fått av din vårdkontakt följs.

Läs bruksanvisningen i förpackningen för viktig information och fullständiga instruktioner.

Kontakta din förskrivare om du upplever problem.

På Wellspect utvecklar vi innovativa lösningar för kontinensvård som förbättrar livskvalitén för människor med blås- och tarmproblem. Vi vill inspirera våra användare till bättre självförtroende och självständighet samt till en god hälsa och välbefinnande. Vi har varit ledande inom industrin i 40 år med våra varumärken LoFric[®] och Navina[™]. Vår målsättning är alltid att minimera klimatavtrycket från våra produkter och vi strävar passionerat efter att bli klimatneutrala. Vi arbetar tätt tillsammans med användare och vårdpersonal för att förbättra våra produkter och tjänster på ett hållbart sätt, idag och för framtiden.

Wellspect. A Real Difference.

För mer information om våra produkter och tjänster, besök wellspect.se.

Följ oss också på Facebook och Instagram.

wellspect.se

Wellspect Healthcare, Aminogatan 1, 431 21 Mölndal. Tel: 031-376 40 00.

LoFric



Tillverkare: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sverige.
Tel: 031-3766 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

R_x Only