

LoFric Elle – för kvinnor

LoFric® Elle™ hydrofil engångskateter, klar att använda.

För blåsskötsel med ren intermitterant kateterisering vid kort- eller långtidsanvändning.

LoFric skall endast användas efter förskrivning.


Innan användning säkerställ att de råd och instruktioner kring kateteriseringsproceduren som du fått av din vårdkontakt följs.

Läs bruksanvisningen i förpackningen för viktig information och fullständiga instruktioner.

Kontakta din förskrivare om du upplever problem.

Användarinstruktioner

1. Tvätta händerna ordentligt med tvål och vatten.
2. Bryt det övre sterila barriärlocket.
3. Bryt den nedre sterila barriären genom att fatta tag i behållaren och
 - a) vrid eller böj varsamt den övre delen (bild b och c).
 - d) Håll produkten lodrätt och ta ut katetern rakt upp från behållaren
4. Töm ut den resterande vätskan från behållaren (i toaletten eller handfatet).
5. ALTERNATIV: Om du fäster behållaren i den övre delen kan den användas som handtag.
6. Luta ditt bäcken framåt, sära på blygdläpparna, dra dem försiktigt uppåt, urinröret ligger strax ovanför vaginalöppningen. Med andra handen, för katetern långsamt in i urinrörsöppningen, tills urin börjar rinna, för in den lite längre för att säkerställa att båda kateterögon befinner sig i urinblåsan
7. När urinflödet avtar till droppar, dra ut katetern långsamt. Om urin börjar rinna igen, vänta tills urinflödet upphör, för att säkerställa fullständig tömning av urinblåsan.
8. Sätt tillbaka katetern i den nedre behållaren. Kassera eller förvara den i din väska tills du kan kassera den.
Vänligen notera! Behållaren är återvinningsbar.

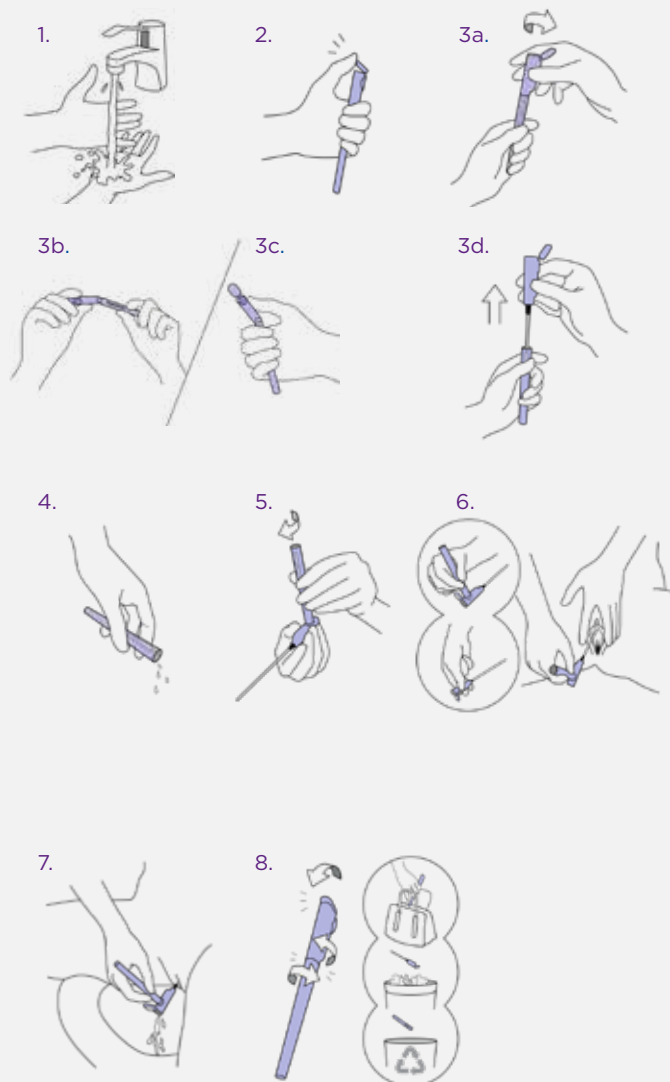

På Wellspect utvecklar vi innovativa lösningar för kontinensvård som förändrar människors liv. Vi engagerar oss och inspirerar våra användare till bättre självförtroende och självständighet samt till en god hälsa och välbefinnande. Vi har varit ledande inom industrin i mer än 30 år med våra varumärken LoFric® och Navina™. Vi skapar pålitliga och användarvänliga produkter för blås- och tarmskötsel med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi strävar passionerat efter att bli klimatneutrala och arbetar tätt tillsammans med användare och vårdpersonal som hela tiden inspirerar oss till att förbättra våra produkter och tjänster på ett hållbart sätt, idag och för framtiden.

Wellspect. A Real Difference.

För mer information om våra produkter och vårt initiativ Advancing Continence Care Together (ACCT), besök wellspect.se.

Följ oss också på Facebook och Instagram

wellspect.se



Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, Box 14, 431 21 Mölndal. Tel 031 376 40 00. www.wellspect.se

LoFric



Tillverkare: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, Box 14, 431 21 Mölndal
Tel: 01 376 40 00. www.wellspect.se

CE 2797

Rx Only