



ETT NYTT
HJÄLPMEDEL SÅ
DINA PATIENTER
KAN KÄNNA SIG
SÄKRA

Navina Insert är utvecklat för att förhindra
avföringsläckage

Navina™

FRÅN ORO TILL NYTT HOPP

Vad är egentligen livskvalitet? Fråga någon med tarmproblem som inte vågar gå hemifrån av rädsla för avföringsläckage. När allting kretsar kring att ha en toalett i närheten, blir livet väldigt begränsat. Det kan dessutom leda till att behandlingen blir fördröjd, isolering och depression.

Wellspect lanserar en smart lösning på hjälpmedel för att hantera avföringsinkontinens. Den här innovationen är det mjuka och flexibla Navina Insert, tillverkat av silikon och vätska. Det bygger på vetenskapen om flytande dynamik vilket gör att den anpassar sig till kroppen och hjälper till att förhindra avföringsläckage.

“Det är inte ofta jag säger detta, men jag är så väldigt nöjd med den här produkten. Jag kan verkligen se hur den kan göra en verklig skillnad för mina patienter.”


Bev Collins, Clinical Nurse Lead,
Wellspect HealthCare, UK




INSTRUKTION STEG FÖR STEG



1. Håll den glidbehandlade analproppen med hjälp av den vita applikatorn i plast och rikta den övre rundade delen mot ändtarmsöppningen.

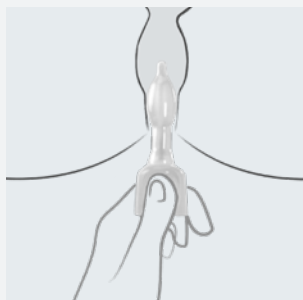

2. För försiktigt in analproppen tills handtaget vilar mot ändtarmsöppningen. Avlägsna applikatorn och släng den i hushållsavfallet.

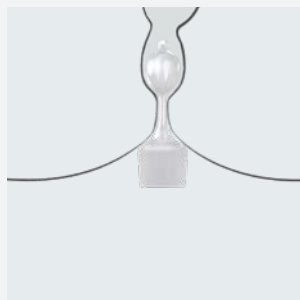

3. Den vätskefyllda analproppen anpassar sig till kroppen och hjälper till att förhindra läckage.



4. För att ta ut den, ta tag i handtaget och dra försiktigt för att avlägsna analproppen och släng den i hushållsavfallet.



EN INNOVATIV DESIGN FÖR ÖKAD SÄKERHET

Den flexibla, vätskefyllda analproppen är utvecklad för att ändra form och anpassa sig när vätskan rör sig inuti. Det gör att den är enkel att föra in och ta ut, och bekväm att bära. Navina Insert är designad för att vara enkel att hantera, förhindra läckage och göra det möjligt att leva ett självständigt och aktivt liv.

- Utvecklad för att skydda mot avföringsläckage
- Designad för att vara bekväm
- Framtagen för att vara hygienisk

24 TIMMARS ANVÄNDNING

Kan bäras i upp till 24 timmar

HYGIENISK OCH ANVÄNDAR- VÄNLIG

Applikatorn i plast ger ett bra grepp vid införande och håller fingrarna rena.

FLEXIBILITET OCH KOMFORT

Tillverkad av mjukt silikon och fylld med vätska är analproppen noggrant utvecklad för att säkerställa bekväm applicering och anpassning till kroppen.



STABIL POSITIONERING

Det breda yttre handtaget formar sig bekvämt och är designat för att hålla produkten säkert på plats.

DUBBEL TÄTNING

För det första ligger den rundade övre delen inne i analkanalen an mot sfinktern och sluter tätt för att förhindra avföringsläckage. För det andra formar sig halsen på analproppen efter tarmen och fyller ut den så att trycket från sfinktern tätar och ytterligare förhindrar läckage.



**KONTAKTA OSS IDAG
SÅ KAN DU HJÄLPA
DINA PATIENTER DIREKT**

Om du har frågor eller behöver patientbroschyrer, kontakta Wellspect Kundtjänst www.wellspect.se

NAVINA INSERT - BESKRIVNING:

Navina Insert är en mjuk, flexibel och vätskefylld analpropp som utformats för att förhindra avföringsläckage. Analproppen är icke-steril och endast avsedd för engångsbruk.

AVSEDD ANVÄNDNING

Analproppen är utformad för att sättas in av användaren själv för att täta och förhindra läckage av avföring från ändtarmen.

INDIKATIONER

Navina Insert är indikerad för hantering av ofrivilligt avföringsläckage på grund av tarminkontinens.

KONTRAINDIKATIONER

Navina Insert skall inte användas på barn.

På Wellspect utvecklar vi innovativa lösningar för kontinensvård som förbättrar livskvaliteten för människor med blås- och tarmproblem. Vi vill inspirera våra användare till bättre självförtroende och självständighet samt till en god hälsa och välbefinnande. Vi har varit ledande inom industrin i 40 år med våra varumärken LoFric[®] och Navina[™]. Vår målsättning är alltid att minimera klimatavtrycket från våra produkter och vi strävar passionerat efter att bli klimatneutrala. Vi arbetar tätt tillsammans med användare och vårdpersonal för att förbättra våra produkter och tjänster på ett hållbart sätt, idag och för framtiden.

Wellspect. En verklig skillnad.

För mer information om våra produkter och vårt initiativ Advancing Continence Care Together (ACCT), besök wellspect.se.

Följ oss också på Facebook och Instagram.

wellspect.se

Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, Box 14, 431 21 Mölndal. Tel 031 376 40 00.

Navina fecal incontinence insert



R_x Only



EC REP

Tillverkare:
Minnesota Medical Technologies
2446 Henry Road Northwest
Stewartville, MN 55976 USA
507-533-0366
www.mnmedtech.us

Importör:
Wellspect HealthCare Ami-
nogatan 1
Box 14, 431 21 Mölndal,
Sverige.
www.wellspect.com

MPS Medical Product Service
GmbH
Borngasse 20
Braunfels 35619
Germany